



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich und sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Anwendung/Sicherheit: Der Reflexhammer ist ausschließlich als nichtinvasives medizinisches Instrument zur Auslösung neuronaler Reaktionen auf gesunder Haut konzipiert. Aufgrund seiner Funktionen enthält dieses Instrument eine punktierte Spitze, die bei unsachgemäßer Verwendung oder für andere Zwecke schwere Verletzungen verursachen kann. Die Anwendung des Reflex- und Perkussionshammers darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Das Instrument ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Zweckbestimmung: Diagnostik-Instrument für die externe Auslösung von myotatischen, plantaren und kutanen Reaktionen. Jede andere als die hier beschriebene Verwendung entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Instruments. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Bedienung: Lockeres Klopfen aus dem Handgelenk mittels Reflexhammer auf die entsprechende Ansatzsehne. Dies führt zu einer reflektorischen Kontraktion (Zusammenziehen) des betreffenden Muskels. Mit Hilfe der Nadel und des Pinsels können die verschiedenen Haut-/Oberflächensensibilitätsprüfungen durchgeführt werden.


Manuelle Reinigung: Reflexhammer mit angefeuchtetem Tuch oder Oberflächen-Reinigungsmittel abwischen.

Desinfektion: Reinigen Sie den Reflexhammer vor jedem Gebrauch gründlich. Verwenden Sie zum Reinigen aller verschmutzten Teile nur ein sauberes Baumwolltuch oder einen Tupfer und eine Isopropylalkohol-Lösung. Das Instrument darf nicht sterilisiert werden. Es ist dringend erforderlich, das Eintrocknen der Verunreinigungen auf dem Material zu verhindern. Die Desinfektion hat das Ziel, sowohl das Personal und den Patienten/die Patientin während des Gebrauchs zu schützen.

WESTMED distributed by Fleischhacker GmbH & Co. KG
An der Silberkuhle 18, 58239 Schwerte, Germany
Tel: +49 2304 931 0, Fax: +49 2304 931 199
info@fleischhacker.biz



Zhejiang Honsun Medical Instrument Co., Ltd.
Sanjiang Street, Building 8 of Art & Crafts Park Beiao
Industrial Estate, 325100 Wenzhou, Zhejiang, P.R.China
Mfg. Date:

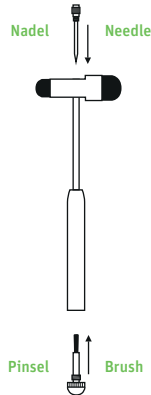

Please read the instructions thoroughly and carefully before using this product.

Use/safety: The reflex hammer should only be used as a non-invasive medical instrument to elicit neural responses on healthy skin. Due to its functions, this instrument contains a punctured spike that may cause serious injury if used incorrectly or for other purposes. The reflex and percussion hammer may only be used by authorized professionals. Keep the instrument out of the reach of children.

Intended use: Diagnostic instrument for the external triggering of myotatic, plantar, and cutaneous reactions. Any use other than that described here is not in accordance with the intended use of the instrument. The manufacturer is not liable for any resulting damages. The user alone bears the risk.

Operation: Knock softly from the wrist with the reflex hammer on the corresponding attachment tendon. This results in a reflex contraction (contracting) of the muscle concerned. The needle and brush can be used to test the various skin/surface sensitivities.

Manual cleaning: Wipe reflex hammer clean with a moistened tissue or surface cleaning agent.

Disinfection: Clean the reflex hammer thoroughly before each use. Use only a clean cotton cloth or swab and an isopropyl alcohol solution to clean all contaminated parts. The instrument may not be sterilized. It is imperative to prevent the contaminants from drying on the material. Disinfection aims to protect both the staff and the patient during use.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
SRN: DE-AR-000000001
Art. No.: 5810033 Manufacturer No.: HS-401G3



MDD 93/42/EEC

EN 980:2008; EN 1041:2008;
EN ISO 13485:2016; EN ISO 14971:2007

