


## EXTREMITÄTEN-TOURNIQUET




Lokalisieren Sie die Verletzungsstelle\* und legen Sie **SAM<sup>®</sup> XT** 5 bis 7 cm (2 bis 3 Zoll) oberhalb der Wunde um die Gliedmaße herum direkt auf der Haut an.

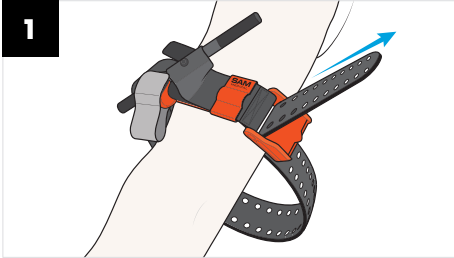

Führen Sie die Spitze des Gurtes durch die Öffnung in der Schnalle. Fassen Sie den Gurt nahe der Schnalle und ziehen Sie ihn fest und gleichmäßig in Richtung Schnalle, bis er arretiert. Drücken Sie den Gurt unter Beibehalten der Spannung auf sich selbst herunter, um ihn zu sichern.


**DECKEN SIE DIE C-HAKEN DES KNEBELS NICHT AB.**

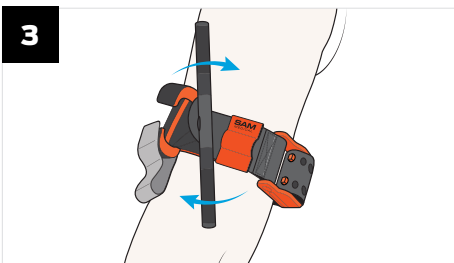

Drehen Sie den Spannknebel aus Metall, bis die Blutung aufgehört hat.



Fixieren Sie den Spannknebel aus Metall in den C-Haken und bestätigen Sie, dass die Blutung aufgehört hat. Falls die Blutung andauert, versuchen Sie, das Tourniquet durch weitere Drehungen des Spannknebels aus Metall fester zu ziehen. Wenn die Blutung dadurch nicht gestoppt wird, bringen Sie einen zweiten **SAM<sup>®</sup> XT** neben dem ersten an und überprüfen nochmals, ob die Blutung aufgehört hat.


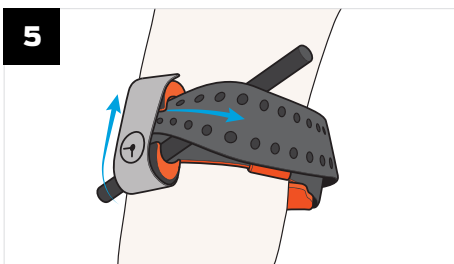


Führen Sie den Gurt zwischen den C-Haken hindurch und wickeln Sie ihn über den Knebel und um die Gliedmaße herum.

Bringen Sie das (Ⓢ) Zeitband fest über den C-Haken an und notieren Sie den Zeitpunkt des Anlegens.

**⚠ ACHTUNG:** SAM<sup>®</sup> XT DARF NICHT über festen Gegenständen in der Kleidung angelegt werden.

\* Ist die Verletzungsstelle nicht gut sichtbar, legen Sie **SAM<sup>®</sup> XT** möglichst **„hoch und fest“ am verletzten Arm oder Bein an**. Falls es die Situation erlaubt, beurteilen Sie die verletzte Gliedmaße erneut und legen Sie den SAM<sup>®</sup> XT 5 bis 7 cm (2 bis 3 Zoll) oberhalb der Wunde direkt auf der Haut an.

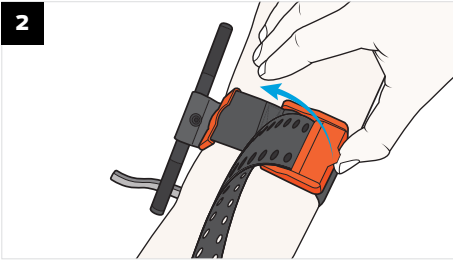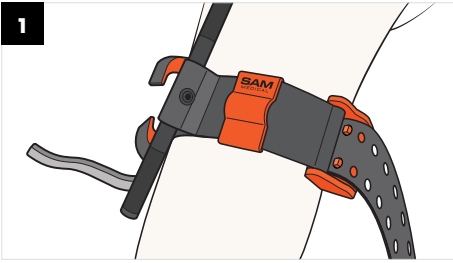

Lassen Sie das Tourniquet an Ort und Stelle, bis Sie die Anweisung eines Arztes erhalten.

**ABNEHMEN VON SAM® XT** Ziehen Sie das (⌚) Zeitband ab und drehen Sie den Spannkegel aus Metall los.

Heben Sie die Lasche vorne an der Schnalle an, sodass die Zacken zurückgezogen werden können.

**ENTSORGUNG:** Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der Richtlinie der Einrichtung.

**TECHN. DATEN:**

**GRÖSSE IM VERPACKTEN ZUSTAND UND GEWICHT\***

- Länge: 6,3 cm (2,5 Zoll)
- Breite: 3,8 cm (1,5 Zoll)
- Höhe: 18,4 cm (7,25 Zoll)
- Gewicht: 108 g (3,8 oz)

**LEISTUNGSDATEN**

TRUFORCE™ Schnallentechnologie mit automatischem Sperrmechanismus zum Eingreifen in Gurtlöcher im Umfangsbereich von: 13,9 bis 88,9 cm (5,5 bis 35 Zoll)

\*Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Fertigungsprozess.

**Hinweis für Anwender und/oder Patienten:**

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates zu melden, in dem der Anwender bzw. der Patient ansässig ist.

**VERWENDUNGSZWECK:**

Das SAM® XT Extremitäten-Tourniquet ist für die Anlage um eine Gliedmaße vorgesehen, um den arteriellen Blutfluss zu unterbinden.

**INDIKATION:**

Zur Verwendung durch Ersthelfer bei Patienten mit Verletzungen der Gliedmaßen in einem Umfangsbereich von 13,9 bis 88,9 cm (5,5 bis 35 Zoll) zur Kontrolle lebensbedrohlicher Blutungen, wenn direkter Druck nicht wirksam oder unpraktisch ist.

**⚠ VORSICHTSHINWEISE:**

- SAM XT darf nicht über festen Gegenständen angelegt werden.
- Lassen Sie das Tourniquet an Ort und Stelle, bis Sie die Anweisung eines Arztes erhalten.
- Das gebrauchte Produkt ist gemäß dem Protokoll für biogefährliche Abfälle der medizinischen Einrichtung zu entsorgen.
- Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen.
- Eine Wiederverwendung kann Krankheiten (z. B. Infektion) oder Verletzungen zur Folge haben (reduzierte Leistung).

**UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN:**

- Die Anlage eines Tourniquets kann erhebliche Schmerzen verursachen.
- Die Anlage des Tourniquets kann Haut-, Muskel-, Gefäß- oder Nervenschäden verursachen.
- Eine längere Tourniquetanlage (> 4 Stunden) kann eine Rhabdomyolyse zur Folge haben oder eine Fasziotomie oder Amputation notwendig machen.

US-Patent-Nr. 10.258.347 | 10.363.046  
SAM® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke.

- REF ● XT600-BK-EN / NSN-Nr. 6515-01-670-2240
- REF ● XT600-OR-EN
- REF ● XT600-BL-EN

SAM Medical Products®  
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200  
Tualatin, OR 97062 USA  
+1 503.639.5474

sammedical.com

EC REP CE  
Emergo Europe, Prinsessegracht 20,  
2514 AP, Den Haag, Niederlande

MedEnvoy Global BV  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,  
2595 AM Den Haag, Niederlande

**SYMBOLVERZEICHNIS**

Hersteller	
Los-/Chargencode	
Bestellnummer	
Nicht wiederverwenden	
Zeitband-Symbol	
Vorsichtshinweis	
Medizinprodukt	
Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	
CE-Kennzeichnung	
Gebrauchsanweisung beachten. Elektronische Gebrauchsanweisung verfügbar unter: sammedical.com/eIFU	
Importeur	